


LED FACIAL MASK

Points importants :

1. Veuillez utiliser le produit selon la méthode correcte ; il est toujours préférable de lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil, afin d'éviter tout dysfonctionnement dû à une mauvaise manipulation.
2. Avant de porter le masque LED, nous vous conseillons de réaliser un test de sensibilité à la lumière : allumez simplement l'appareil et posez-le sur votre bras ou votre jambe pendant 3 à 5 min ; si votre peau rougit ou si vous ressentez une gêne, cessez de l'utiliser et contactez-nous pour le service après-vente.
3. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous prenez des médicaments. Veuillez consulter votre médecin avant utilisation.
4. Ne laissez pas les enfants l'utiliser — ce n'est pas un jouet.
5. Ne l'utilisez pas si vous souffrez de troubles physiques, sensoriels ou mentaux, ou si vous suivez un traitement dermatologique en cours, y compris pendant la phase de poussée (comme le lupus érythémateux, l'eczéma photosensible ou l'albinisme, etc.)
6. Ce produit n'est pas étanche ; ne l'immergez pas dans l'eau, vous pouvez le nettoyer avec une lingette humide.
7. Il est recommandé de porter les lunettes de protection si vous êtes sensible à la lumière. Si vous ressentez toujours une gêne, nous vous suggérons de fermer les yeux et de profiter de la séance pendant 10 à 15 min.
8. Il est recommandé de l'utiliser 3 à 4 fois par semaine, à raison de 10 à 30 min par séance.

Explication du fonctionnement du produit :

- 1. Bouton d'alimentation : appui long de 1 à 2 s pour allumer / éteindre ;
- 2. La touche E est la touche de réglage de l'énergie : appui bref pour régler et basculer entre les 3 niveaux de puissance ;
- 3. Touche de minuterie : appuyez sur la touche T+ pour augmenter la durée d'éclairage Appuyez sur la touche T- pour réduire la durée d'éclairage
5 niveaux (10 / 15 / 20 / 25 / 30 min)
une seule séance de 15 à 25 minutes est recommandée.
- 4. Pendant la charge, le voyant de la batterie clignote ; il s'éteint une fois la charge terminée.

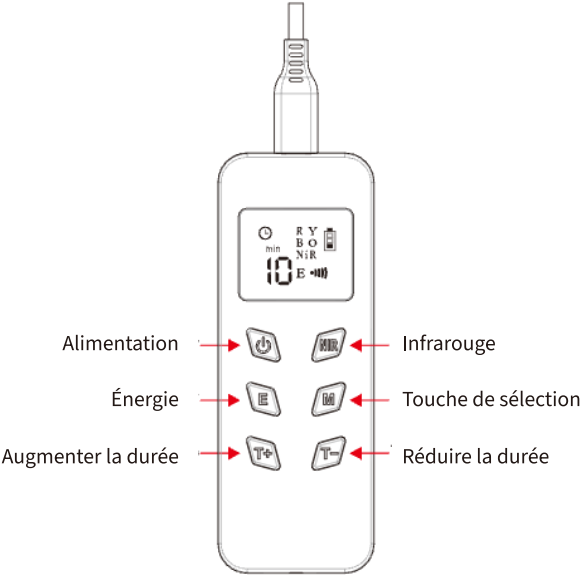

Quatre couleurs

			
Lumière rouge 630 nm	Lumière bleue 460 nm	Lumière jaune 590 nm	Lumière proche infrarouge 850 nm

Liste des accessoires



Sac de rangement



Sangle x3



Câble de charge



Notice



Le contrôleur



Masque facial




Masque pour les yeux

Caractéristiques du produit :

Nom du produit	Appareil masque facial LED		
Perles LED	240	Dimensions du carton	34x23x4,5 cm
Minuterie	10/15/20/25/30 min	Fréquence	0,3 A 50/60 HZ
Température d'utilisation	0-40 C	Poids net du produit	0,32 kg
Entrée de l'adaptateur	100-240 V	Sortie de l'adaptateur	5V DC 3000MA
Quatre longueurs d'onde	Lumière rouge 630 nm, lumière bleue 460 nm, lumière jaune 590 nm et lumière proche infrarouge 850 nm		
Contenu de l'emballage	Masque, contrôleur, câble de charge, notice, sangle de fixation		


Procédure de mise en place

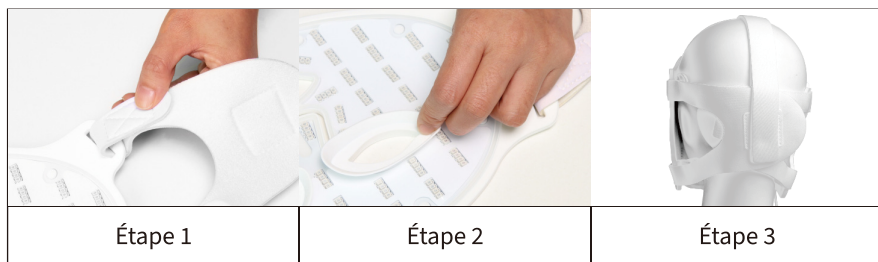

Étape 4


Retirez le contrôleur et le câble USB. Raccordez-les l'un à l'autre. Branchez l'extrémité USB sur un adaptateur, puis sur une prise de courant.

Mettez la prise sous tension et chargez le contrôleur jusqu'à obtenir 3 barres pleines, comme indiqué ci-dessous :

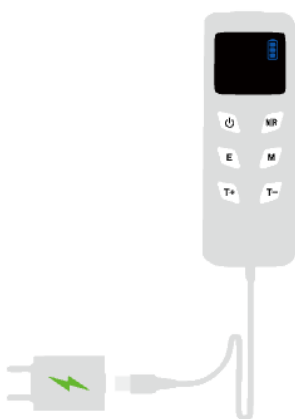

Étape 5

Raccordez le masque à lumière rouge au contrôleur, puis mettez-le en marche en appuyant fermement sur le bouton d'alimentation.

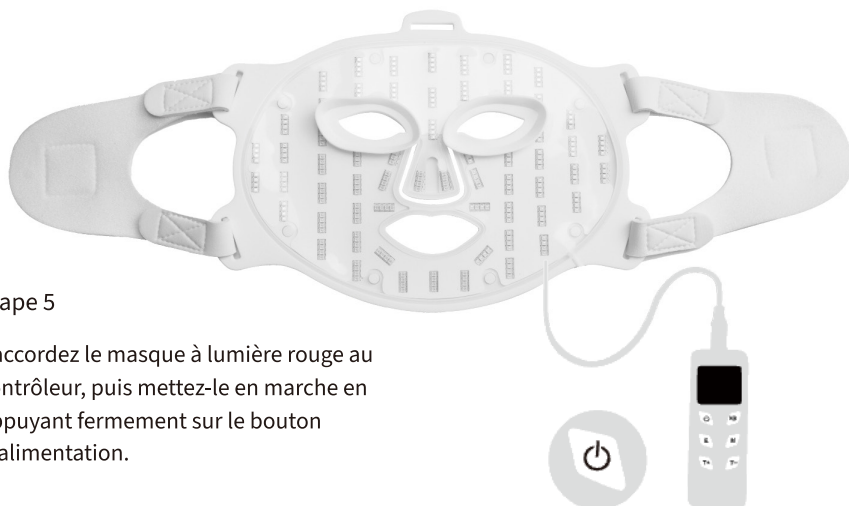

LED FACIAL MASK :

Le LED FACIAL MASK est un appareil de photothérapie LED rechargeable, à porter chez soi pour les soins de beauté. La surface de ce produit est composée de silicone de qualité médicale, pratique et facile à utiliser, pliable et transportable ; il s'adapte à différents visages grâce à la boucle en nylon réglable, ce qui le rend adapté à différentes personnes. Il est composé de 240 diodes LED de haute qualité, réparties en 60 blocs contenant chacun 4 perles LED, chacune des quatre perles émettant 4 longueurs d'onde (lumière rouge 630 nm, lumière bleue 460 nm, lumière jaune 590 nm, lumière proche infrarouge 850 nm). Le contrôleur permet en outre de régler 3 niveaux d'énergie et différentes durées d'éclairage. Basé sur la photothérapie, ce produit pénètre plus profondément dans la peau, stimule les cellules productrices de collagène et d'élastine et permet d'obtenir un effet embellisseur sur la peau.

Efficacité des modes :

Lumière rouge : 630 nm, anti-âge, stimule le collagène,affermit, augmente l'élasticité

Lumière bleue : 460 nm, élimine les bactéries et les bactéries de l'acné, réduit l'inflammation et les cicatrices, augmente l'oxygénation de la peau

Lumière jaune : 590 nm, équilibre le grain de peau, stimule les globules rouges pour réduire les rougeurs et les ridules

Lumière proche infrarouge : 850 nm, répare la peau, améliore la circulation sanguine, augmente l'hydratation de la peau

Les modes sont : Lumière rouge, 1.2.3 Niveau

Lumière bleue, 1.2.3 Niveau

Lumière jaune, 1.2.3 Niveau

La lumière infrarouge est commandée indépendamment et peut aussi être utilisée avec n'importe quelle autre lumière.

Premier réglage :

Avant d'ouvrir l'emballage, chargez toujours complètement la batterie du masque ; le voyant de la batterie sur le contrôleur se met à clignoter pour indiquer la charge.

Le voyant de la batterie s'éteint une fois la charge terminée.

Chargez pendant 4 à 5 heures, puis portez le masque confortablement à l'aide des bandes velcro réglables. Pour installer le masque, faites passer la sangle par l'ouverture située de l'autre côté du masque, autour de la tête, et fixez-la.