


LED FACIAL MASK

Belangrijke aandachtspunten:

1. Gebruik het product volgens de juiste methode; lees altijd eerst de handleiding voordat u het apparaat gebruikt, om storingen door verkeerd gebruik te voorkomen.
2. Voordat u het LED-masker draagt, raden wij een lichtgevoeligheidstest aan: schakel het apparaat in en leg het 3 tot 5 minuten op uw arm of been. Wordt uw huid rood of voelt het onprettig, stop dan met het gebruik en neem contact met ons op voor de klantenservice.
3. Gebruik het apparaat niet als u zwanger bent, borstvoeding geeft of medicijnen gebruikt. Raadpleeg vooraf uw arts.
4. Laat kinderen het apparaat niet gebruiken – het is geen speelgoed.
5. Gebruik het niet bij lichamelijke, zintuiglijke of psychische aandoeningen, of tijdens een lopende dermatologische behandeling, ook niet tijdens een opvlamming (zoals lupus erythematosus, lichtgevoelig eczeem of albinisme, enz.)
6. Dit product is niet waterdicht; dompel het niet onder in water, u kunt het reinigen met een vochtig doekje.
7. Het wordt aanbevolen de beschermbril te dragen als u lichtgevoelig bent. Voelt het dan nog steeds onprettig, sluit dan uw ogen en geniet 10 tot 15 minuten van de behandeling.
8. Het wordt aanbevolen het apparaat 3 tot 4 keer per week te gebruiken, 10 tot 30 minuten per sessie.

Uitleg van de bediening:

- 1. Aan/uit-knop: 1 tot 2 seconden ingedrukt houden om in of uit te schakelen;
- 2. De E-toets is de energieregeltoets: kort indrukken om te wisselen tussen de 3 vermogensstanden;
- 3. Timertoets: druk op T+ om de lichtduur te verlengen
Druk op T- om de lichtduur te verkorten
5 standen (10 / 15 / 20 / 25 / 30 min)
per sessie worden 15 tot 25 minuten aanbevolen.
- 4. Tijdens het opladen knippert de batterij-indicator; deze gaat uit zodra het opladen is voltooid.

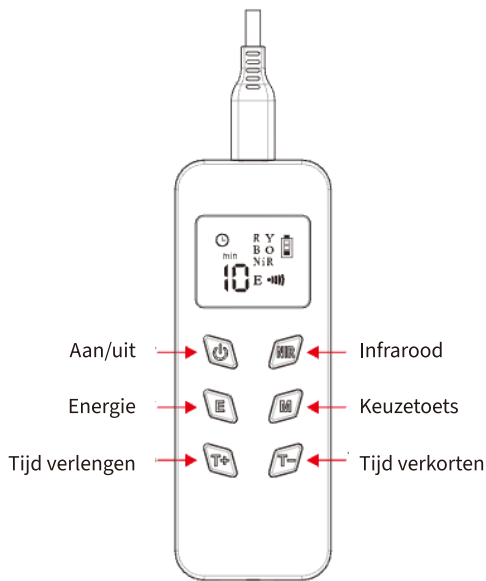

Vier kleuren

			
Rood licht 630 nm	Blauw licht 460 nm	Geel licht 590 nm	Nabij-infrarood licht 850 nm

Inhoud van de verpakking



Opbergtas



Band x3



Oplaadkabel



Handleiding



De controller



Gezichtsmasker




Oogmasker

Productgegevens:

Productnaam	LED-gezichtsmaskerapparaat		
LED-lampjes	240	Doosafmetingen	34x23x4,5 cm
Timer	10/15/20/25/30 min	Frequentie	0,3 A 50/60 HZ
Gebruikstemperatuur	0-40 C	Nettogewicht	0,32 kg
Ingang adapter	100-240 V	Uitgang adapter	5V DC 3000MA
Vier golflengtes	Rood licht 630 nm, blauw licht 460 nm, geel licht 590 nm en nabij-infrarood licht 850 nm		
Inhoud	Masker, controller, oplaadkabel, handleiding, bevestigingsband		


Zo zet u het masker op

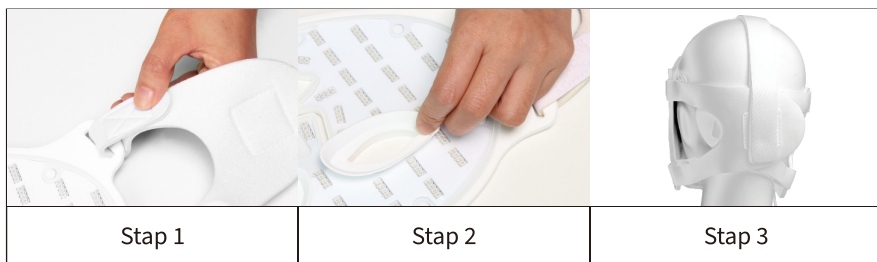

Stap 4

Haal de controller en de USB-kabel eruit. Sluit ze op elkaar aan. Steek het USB-uiteinde in een adapter en die vervolgens in een stopcontact.

Zet het stopcontact aan en laad de controller op tot 3 volle streepjes worden weergegeven, zoals hieronder te zien:

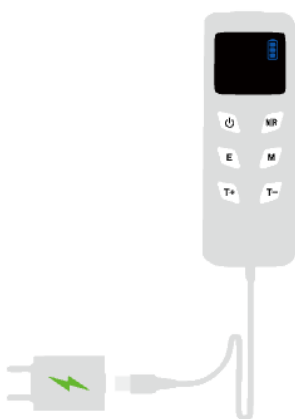

Stap 5

Sluit het roodlichtmasker aan op de controller en schakel het in door stevig op de aan/uit-knop te drukken.

LED FACIAL MASK:

Het LED FACIAL MASK is een oplaadbaar LED-lichttherapieapparaat dat u thuis draagt voor schoonheidsverzorging. Het oppervlak van dit product is gemaakt van siliconen van medische kwaliteit, handig en eenvoudig in gebruik, opvouwbaar en draagbaar; dankzij de verstelbare nylonsluiting past het op verschillende gezichten en is het daardoor geschikt voor uiteenlopende gebruikers. Het bestaat uit 240 hoogwaardige LED-dioden, verdeeld over 60 blokken met elk 4 LED-lampjes, waarbij de vier lampjes 4 golflengtes uitzenden (rood licht 630 nm, blauw licht 460 nm, geel licht 590 nm, nabij-infrarood licht 850 nm). Met de controller stelt u bovendien 3 energieniveaus en verschillende lichtduren in. Op basis van lichttherapie dringt dit product dieper in de huid door, stimuleert het de collageen- en elastineproducerende cellen en zorgt het voor een mooier huidbeeld.

Werking van de standen:

Rood licht: 630 nm, anti-aging, stimuleert collageen, verstevigt, verhoogt de elasticiteit

Blauw licht: 460 nm, doodt bacteriën en acnebacteriën, vermindert ontstekingen en littekens, verhoogt de zuurstoftoevoer naar de huid

Geel licht: 590 nm, egaliseert de huidstructuur, stimuleert de rode bloedcellen en vermindert roodheid en fijne lijntjes

Nabij-infrarood licht: 850 nm, herstelt de huid, verbetert de bloedcirculatie, verhoogt de hydratatie van de huid

De standen zijn: Rood licht, 1.2.3 Niveau

Blauw licht, 1.2.3 Niveau

Geel licht, 1.2.3 Niveau

Het infraroodlicht wordt afzonderlijk bediend en kan ook samen met elk ander licht worden gebruikt.

Eerste instelling:

Laad de batterij van het masker vóór het openen van de verpakking altijd volledig op; het lampje op de controller gaat knipperen om het opladen aan te geven.

De batterij-indicator gaat uit zodra het opladen is voltooid.

Laad 4 tot 5 uur op en draag het masker daarna comfortabel met de verstelbare klittenbanden. Haal om het masker op te zetten de band door de opening aan de andere kant van het masker, om het hoofd heen, en zet hem vast.